

## DATOS OBJETIVOS

Deja atrás las evaluaciones subjetivas y empieza con objetivas con evaluaciones analíticas.




## SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS PACIENTES

Resalta el progreso de tu paciente en todo el proceso.



## AUTONOMÍA CONTROLADA DE LOS PACIENTES

Crea programas de rehabilitación a medida del paciente con biofeedback.

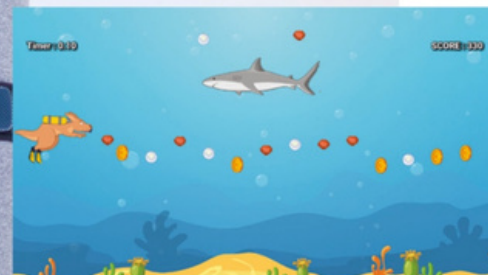


## AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN DEL PACIENTE

Pon un punto de diversión en la rehabilitación con juegos.




## DESTACA LOS RESULTADOS

Con MyKinvent puedes compartir tu trabajo con otros profesionales y con el paciente.

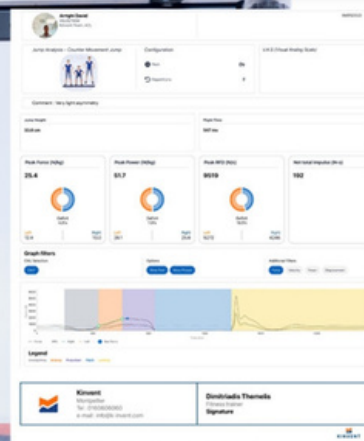

## AHORRO DE TIEMPO

Genere su report en 1 clic.

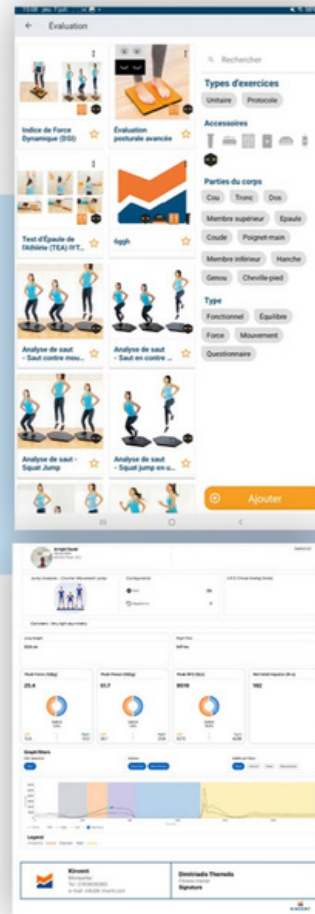

## SIGUE LA PROGRESIÓN DE TUS PACIENTES EN EL ANÁLISIS DE SALTO

**Protocolo Counter Movement Jump y Squat Jump (CMJ & SJ):**  
Para evaluar la altura del salto y obtener indicadores durante la fase de impulso en el empuje, la potencia, la fuerza explosiva, el RFD (Rate of Force Development) y la distribución de fuerzas en izquierda/derecha.

**Protocolo Drop Jump (DJ):**  
Para obtener la altura de salto después de un aterrizaje, el desarrollo de la fuerza durante el contacto con el suelo y el RSI (Reactive Strength Index)

## PROTOCOLOS CLAVE

**Perfil fuerza/velocidad:**  
Mida la carga óptima para la potencia máxima.

**Índice de fuerza dinámica (DSI):**  
Para obtener la relación entre la fuerza de pico balístico de un atleta y su fuerza de pico isométrica.



# K-DELTA

## LAS PLATAFORMAS DE FUERZA PARA EL ANÁLISIS BIOMECÁNICO AVANZADO

Diseñados para el rendimiento deportivo, las K-Delta son ideales para gestionar el retorno al deporte del atleta para ayudarlo a encontrar su máximo rendimiento.

2000Hz  
de frecuencia  
de adquisición máxima

20h  
horas de autonomía  
20m  
metros de alcance

Fuerza máxima soportable  
2  
tonelada/plataforma



Tecnología bluetooth

8.8Kg

Peso de cada plato


44X547X368mm

Ancho/alto/largo

0,1%

de margen de error



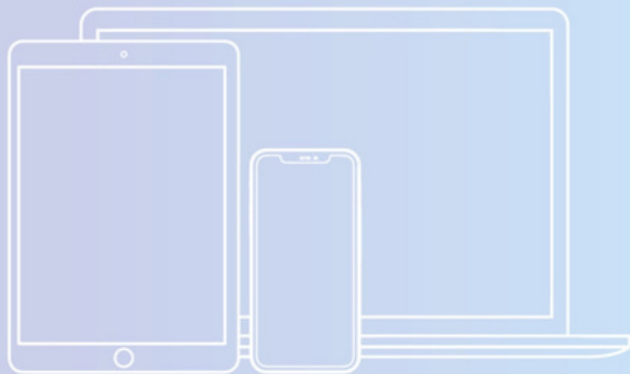

# LICENCIAS

		STARTER	PREMIUM	EXCELLENCE
USUARIOS	Número de terminales	3	6	20
	Número de perfiles	3	6	20
	MyKINVENT		●	●
TESTS	Evaluaciones básicas	●	●	●
	Cuestionarios	●	●	●
	Protocolos básicos	●	●	●
	Actividades personalizadas	●	●	●
	Protocolos personalizadas	●	●	●
	Protocolos Premium		●	●
	Actividades K-Deltas + K-Move		●	●
	Interfaz Deltas		●	●
	Gestión de varios pacientes			●
Protocolos Excellence			●	
K-apture (Grabación de movimiento)			●	
ENTRENAMIENTOS	Biofeedback	●	●	●
	Juegos	●	●	●
	Guía de rehabilitación			●
INFORMES	Informes en la Physio App	●	●	●
	Informes PDF	●	●	●
	Informes PDF avanzados	●	●	●
	Firma personalizada	●	●	●
	Exportaciones PDF de múltiples pacientes			●
	KINVENT Connect			●
	Exportaciones CSV			●

CONFÍAN EN NOSOTROS



KINVENT CERTIFICADO POR

